

100%
MADE IN
ITALY

Barelle specialistiche con 5^a ruota a guida assistita intuitiva elettrica
Specialized stretchers with 5th wheel endowed with intuitive e-drive system

BT1410 - BT1210



GIVAS
health human comfort


Features

Dettagli - Details

- 1** Asta flebo regolabile in altezza (BT0060 opt.)
Adjustable height I.V. stand (BT0060 extra)
- 2** Materassino antistatico (BT0010 opt.) e antidecubito (BT0012 opt.)
Antistatic (BT0010 extra) and antidecubitus (BT0012 extra) mattresses
- 3** Maniglione per regolazione schienale
Handle for backrest adjustment
- 4** Maniglioni di spinta retrattili, ergonomici, in alluminio
Ergonomic retractable push handles made of aluminum
- 5** Sponde abbattibili a compasso
Folding side rails with compass movement
- 6** Pulsante per arresto di emergenza barella
Stretcher emergency stop button
- 7** Paracolpi laterale e angolare in gomma morbida
Lateral and corner bumpers made of soft rubber
- 8** Adesivo metrico per cassetta portalastre regolabile
Metric ruler stickers for adjustable x-ray cassette support
- 9** Porta documenti/abiti
Space for documents/clothes
- 10** Porta bombole gas medicali
Oxygen cylinders holder
- 11** Pulsante sblocco sponde
Side rails release button
- 12** Comando bilaterale Trend-Controtrend-discesa simultanea
Bilateral control for trend/reverse-trend and lying surface lowering
- 13** Comando alzata simultanea
Lying surface lift control
- 14** 5ª ruota a guida assistita intuitiva elettrica
5th wheel endowed with intuitive electric steer system
- 15** Luce di movimento (bilaterale)
Movement light (bilateral)
- 16** Ruote antistatiche Ø 200 mm
Antistatic wheels 200 Ø mm
- 17** Maniglione fisso (BT0030 opt.)
Fixed push handle (BT0030 extra)



Accessories

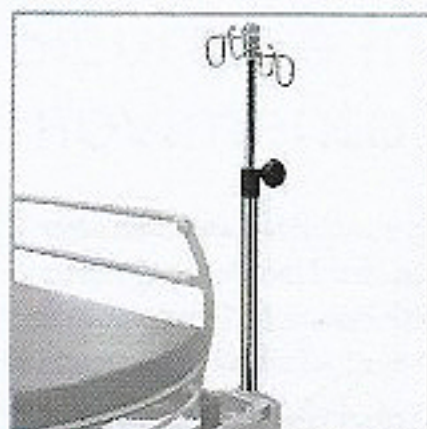

BT0060
Asta flebo ad altezza variabile
in acciaio cromato a 4 ganci
Adjustable height IV stand made of
chromed steel with 4 hooks



BT0025
Pediera con portamonitor e tasca
portadocumenti integrata
Foot panel as shelf for monitor with integrated
compartment for documents



BT0080
Poggia braccio (installabile solo con barra porta
accessori BT0075)
Armrest to be applied on the lateral accessories
bar (BT0075)



BT0035
Asse per massaggio cardiaco
Board for cardiac massage



BT0050
Porta accessori (lato piedi)
Runner for accessories hooking (foot end)



BT0075
Porta accessori bilaterale
Bilateral runner for accessories hooking



BT0070
Porta sacche bilaterale
Bilateral support for urine and drainage bag



BT0056
Supporto Cassette. Porta lastre registrabile
con cassetta ed adesivi metrici
Adjustable X-ray cassette support
complete with cassette and metric ruler
stickers



BT0040
Maniglioni di spinta (lato piedi) retrattili
Retractable push handles (foot end)



BT0030
Maniglione fisso in acciaio cromato (lato piedi)
Fixed push handle (foot end)




BT0055
Cassetta portastre
X-ray cassette



BT0065
Predisposizione fissaggio cassetta porta
lastre allo schienale
X-ray cassette supports for the anchoring
of the X-ray cassette to the backrest



BT0045
Portarullino monorullo (arrotolo non incluso)
Paper roll support (paper roll not included)

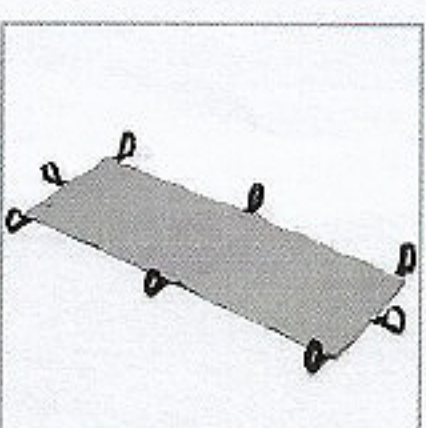

BC0120
Telo per traslazione degente
Transfer sheet

Dati tecnici Technical data



		BT14 10	BT12 10
Lunghezza totale Total length	mm	2130	
Larghezza totale Total width	mm	830	
Piano d'appoggio Mattress platform	mm	1910x650	
Dimensione schienale (L x H) Backrest measures (L x H)	mm	650x705	
Altezza (min/max) Height adjustment (min/max)	mm	560÷880	
Trendelenburg Trendelenburg	deg	12°	
Controtrendelenburg Reverse Trendelenburg	deg	-12°	
Inclinazione schienale Backrest incline	deg	0°/90°	
Inclinazione femorale Femoral section incline	deg	25°	-
Inclinazione gambale Legrest section incline	deg	18°	-

		BT14 10	BT12 10
Spazio tra basamento e terra Space between base and ground	mm	17	
Interasse colonne Distance between two columns	mm	1602	
Superficie radiotrasparente Radiotransparent surface	mm	445x1500	
Materasso Mattress	mm	1940x620x(80-100)	
Peso totale Total weight	Kg	123	
Portata in sicurezza* Safe payload*	Kg	300	
Peso massimo paziente Maximum patient weight	Kg	255	
Classe di protezione elettrica Insulation class		I	
Norme di riferimento Reference standards		Direttiva 93/42/CEE CEI EN 60601-1	

Dati elettrici batteria Battery electrical data

Tipo Type		litio/lithium
Tensione di alimentazione Voltage	VDC	24
Corrente Electricity supply	Ah	9
Carica batteria output Output charge battery	W	Max. 65

Carica batteria input Input charge battery		90/264V AC 50/60Hz 1.3A
Durata batteria con peso paziente Battery life with patient weight	Km	10
Velocità massima Maximum speed	Km/h	6
Inclinazione massima operativa Maximum operating inclination	deg	7°

* Si definisce CARICO DI LAVORO la somma di quanto segue: paziente (255 Kg), materasso (20 Kg) e accessori (25 Kg).
* The PAYLOAD is obtained by adding up: patient (255 kg), mattress (20 kg) and accessories (25 kg) weight.